

多功能刮痧排毒美体按摩仪

刮痧神器



因产品更新型号有变化，颜色功能以实际产品为主

产品原理

本产品是集合负压吸力，磁波理疗，发热降压，穴位按摩，EMS肌电刺激，远红外理疗等功能。可以起到刮痧吸痧，排酸排湿，放松神经，通经活络，调整机能，散寒除温，消除疲劳，清脂减肥，紧致皮肤等功效，是新一代每个家庭都适用的养生仪器。

脉动能量疗法可以快速疏通身体各位的淋巴管及经络，进而起到养生和减肥美容的效果。凸点穴位按摩形成细小间挤压消脂，打散坚硬脂肪，非常有效消除橘皮组织。运用一站式通、调、排的养生，全方位治疗改善各种亚健康。

本仪器对身体某些区域的脂肪有向上吸的有氧作用，刺激人体经络和穴位，同时活化区域内的细胞活力，可提高全身的新陈代谢能力；通过热能量能升高深层脂肪的温度使其溶解代谢，并排出多余的毒素和水份，收紧皮肤真皮层的胶原蛋白纤维组织。降低脂肪水平的同时，还可收紧皮肤，塑造身体曲线。

负压引力：

- 对皮肤及脂肪组织进行向上吸的有氧运动
- 使淋巴排毒功能及血液流通状况增强
- 通过淋巴循环排除毒素。
- 刮痧：开泄毛孔，活血行气的作用。
- 拔罐：刺络放血等疗法，驱邪排毒的效果。

物理热疗：

- 通过热效应，使真皮胶原蛋白增生。
- 持续不断的热量，使神经放松，压力释放。

磁波理疗：


- 促进炎症消退，消除炎症肿胀和疼痛
- 消除疲劳、促进体力恢复。

EMS微电刺激：

- 通过微电流刺激穴位，使经络在瞬间打，通达到通经活络的目的。
- 微电流刺激末梢感觉神经，收缩毛孔，令肌肤细致光泽。

远红外理疗：

- 增强机体免疫力和生物细胞的组织再生能力加速供给养分和酵素，促进身体健康。
- 可以刺激和促进细胞的新陈代谢，静脉淤血消除改善血液循环提高细胞活性和激发胶原蛋白新生让你的肌肤滑嫩有弹性。

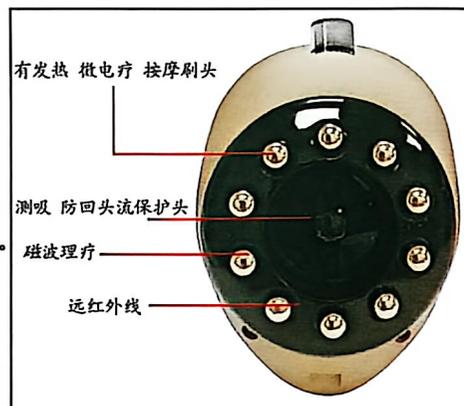

如何使用

技术规格

输入电压：100V-240V

功率：20W

工作电压：9V

包装尺寸：262x152 x 110

材质主体：ABS，304不锈钢

产地：中国

控制面板介绍



刮痧仪操作说明



功能模块	图标显示	刮痧仪
1.开关按键	/	按一下开机再按一下关机
2.EMS微电	EMS	1.EMS共有0-4档，相应液晶屏累计显示1-4格，按EMS循环0-4档-4-0档调节档位
3.负压吸力	VACUUM	1.VAC共有0-4档，相应液晶屏累计显示1-4格，按负压按键循环0-4档-4-0档调节档位
4.加热	🔥	1.加热开关：按一下开加热，加热图标显示，再按一下加热关闭，加热图标关闭 2.加温设置：长按加热按键12秒进入温度设定，液晶屏温度显示闪动，调节范围为35-50摄氏度，按加热按键可循环调节温度，按一次调整1摄氏度，温度调节时，温度显示相应的温度设置并且闪烁，3S不操作保存退出设定状态，温度显示回当前的温度 3.加热/开机或过程中，不显示温度时不加热
5.背光	/	10S不操作，背光自动关闭，触动一下按键背光打开（功能不操作）
6.充电	🔋	1.充电时显示闪电图标，电量档位实时显示当前电量，充电时可工作
7.红灯	🔴	机器工作时红灯亮，不工作时红灯关闭
8.自动关机	/	1.开机状态下30分钟内无操作自动关机

常见问题

在使用过程中出现以下情况时，请参照下面对应的处理方法进行处理。

1. 电源接不通

- ①没有长按电源按键，请长按此键1秒以上
- ②如果是充电款的，充电不足请充电在3小时左右
- ③电源自动关闭机器在开启之后30分钟不使用自动关机

2. 不能开机工作

电源适配器与仪器插座接触不良

3. 微电流不可用

- ①使用部位没有充分接触皮肤或者皮肤干燥者请于主体操作头充分接触皮肤保持皮肤湿润，涂抹化妆品膏体，啫喱类产品保持皮肤湿润。
- ②微电流能量对每个人每个部位的皮肤感觉是有差异的，请根据个人承受强度调整能量大小。
- ③有时感觉皮肤刺痛请调低能量大小保持皮肤湿润充分接触皮肤。

充电说明（仅限充电款）

如果是充电款的首次使用一定要先充电3个小时。充电一次使用时间约70分钟根据所选的模式，使用环境不同会产生时间上的变化。

本产品设置了安全保护，开机30分钟以后会自动关机。充电时，屏幕右上角会有闪电图标闪烁，机器充电满后自动关闭电源。

最后说明主：不同版本有不同功能，具体功能以实际款式为准。

关于保养

每次使用后，必须对机器表面进行清理，清理时必须关掉电源，拔下电源插头，遇到顽固污渍可用沾有稀释中性洗条剂的海绵或布来擦拭，请不要使用强碱，挥发油，除光液，烈性精油，药油等擦拭，可使用少量酒精进行局部擦拭，请使用原厂配套的温性艾草精油使用。清洁完毕以后，请套上底部的盖，此仪器不防水，不可以在水里使用或用水冲洗主机及电源。

注：由于产品不定期升级，可能说明书型号与实际产品有不同，此说明书仅供参考。清洗完毕取下吸水胶管，开启吸力空转5-10分钟，排干水分无杂音即可。清洗过的产品在使用过程中如有异响，是因为管道和泵里面水分未排干，空载开启吸力排干即可。即使未排干也不影响性能和正常使用。

仪器使用说明

1. 负压：

用于刮痧拔罐，刮痧：1-2档，拔罐：3-4档。

操作建议：

- ①. 刮痧：涂上精油，方向：从上往下，力度：用力均匀，发热/出痧即可。
- ②. 拔罐：每次停留时长：一般半分钟左右，时间长度可以看个人的出痧程度调整。

2. 微电：

可补充人体生物电能，激活细胞，缓解疲劳，恢复肌肤弹性，从而达到解决一些皮肤问题、延缓皮肤衰老功效的功能。此功能建议一直开启，档位设置以个人喜好而定。


3. 加热：

设置步骤：


- 第①. 长按加热按钮3秒，直到温度显示闪烁。
- 第②. 单击加热按钮，设置温度(35-50° C)。
- 第③. 设置完毕，温度不再闪烁，即设置成功。(建议设置在40° C左右)



按摩手法

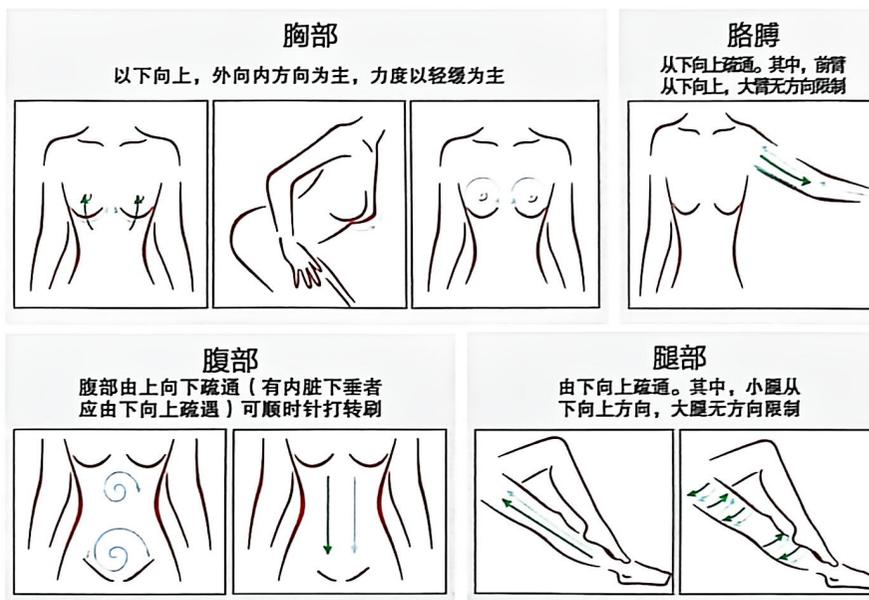

更换海绵

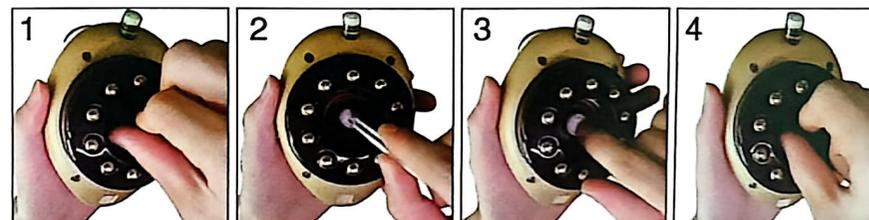

1. 自右向左拧开过滤盖子
2. 用配件包里的镊子取出旧海绵
3. 用手指把配件包里面的新海绵放入
4. 放入过滤盖，自左向右拧微紧(切勿拧死)

注意事项

1. 身体有静脉曲张现象的，不宜使用。
 2. 妊娠期或月经期间，应当暂缓。
 3. 饭后由于血液集中在消化系统，不宜使用。
 4. 使用完毕后，皮肤表面血管扩张，应当先休息30-45分钟后，才可沐浴。
 5. 使用时应顺着同一个方向刷，不可一上一下，一左一右进行。
 6. 由于负压引力会出现痧的现象，应暂缓几天，再使用仪器，效果更佳。
- 特别注意：1、使用仪器前，先取几滴精油均匀涂抹在肌肤周围，按摩至皮肤滋润，以免干燥引起不适。
2、不可涂抹过多精油，以免造成产品堵塞。

售后服务

通常情况，使用中发生故障时，从购买之日起一年之内保修（不含消耗品），遇到保修期发生故障时，按实际费用进行修理。

1. 在遵守本产品相关使用说明的前提下，使用发生故障时，进行无偿修理。
2. 在保修期内，如果符合下列情况是，属于有偿修理
 - ① 错误使用，不正确的修理，改造或因故障发生破损。
 - ② 购买产品后，摔落翻到发生故障及破损。
 - ③ 火灾地震水灾等其它自然灾害导致电压异常发生故障及破损。
 - ④ 与其它电器连接发生异常导致产品故障及破损。
 - ⑤ 消耗品等物品更换时。

产品保修卡

顾客姓名	
经销单位	
联系电话	
购买日期	年 月 日 - 年 月 日
保修期限	年 月 日 - 年 月 日

